



NEW SHAPE

Poderosa combinación de múltiples tecnologías
Remoldea, da forma a una figura más definida y contornea el rostro

Corporal

Adelgazamiento corporal y firmeza

Reducción de celulitis

Reducción de medidas

Masaje corporal

Facial

Firmeza en la piel

Líneas finas de expresión

Complejión radiante

Reafirmar contorno facial

Bienestar

Aliviar la fatiga

Acelear el metabolismo



Reduce el dolor en cuello y espalda baja



Teoría.

Combina 6 tecnologías de vacío, radiofrecuencia, luz infrarroja, rodillo mecánico, láser de diodo y ultrasonido para calentar las células grasas, los tejidos circundantes y las fibras de colágeno dérmicas subyacentes.

Este procedimiento no invasivo puede contornearse y adelgazar el cuerpo al reducir la celulitis, alterar los depósitos de grasa localizados y reafirmar la piel.

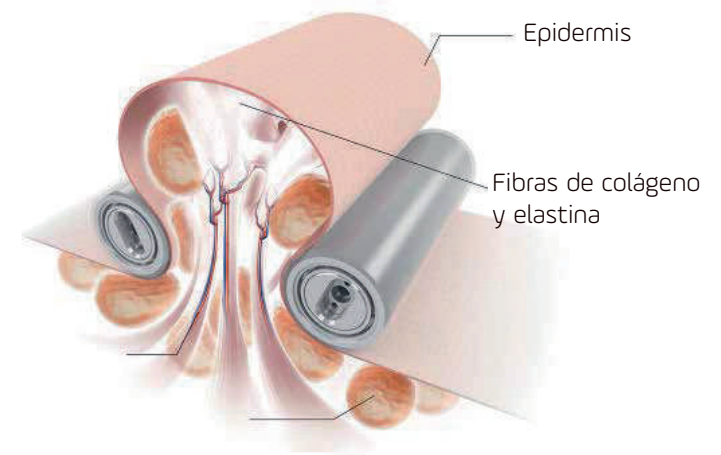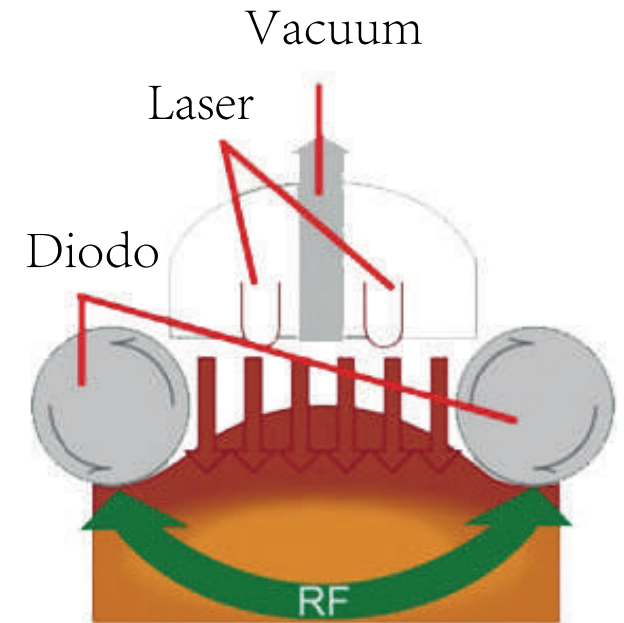

Ventajas técnicas.

- 1 Una poderosa combinación de múltiples tecnologías que trabajan juntas para contorneo una figura bien definida y reducir la apariencia de celulitis.

Sistema Vacuum eleva el tejido a trabajar.

- ◆ Los rodillos mecánicos masajean y suavizan la piel.
- ◆ La energía de radiofrecuencia y la luz infrarroja calientan las células grasas y aumentan la producción de colágeno.
- ◆ El láser de diodo de 635 nm y los trabajos de cavitación pueden explotar y disolver la celulitis.



2 4 piezas de mano para trabajar múltiples áreas del cuerpo.

◆ Pieza de mano 1


Vacío + Rodillo + RF + Luz infrarroja



Para tratamiento en abdomen y espalda.

◆ Pieza de mano 2

Vacío + Rodillo + RF + Luz infrarroja

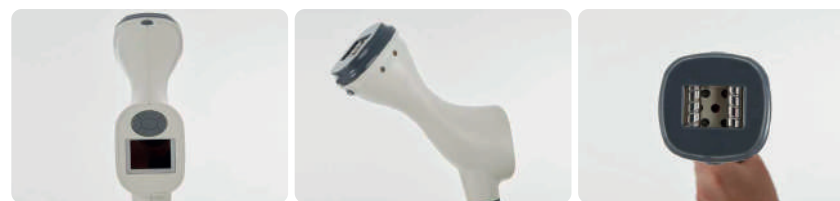

Para tratamiento en hombros, brazo, abdomen, espalda, glúteos, muslos.

◆ Pieza de mano 3

Vacío + RF + Luz infrarroja



Para tratamiento en rostro y cuello

◆ Pieza de mano 4

Láser de diodo 635nm + Cavitación por ultrasonido



Para la celulitis que explota y se disuelve

3 Interfaz de uso amigable

- ◆ 5 grupos predefinidos parámetros de uso común.



4 Diseño de grandes beneficios

- ◆ **Conveniente**, sin tiempo de inactividad para el paciente, sin operaciones complicadas para el terapeuta.
- ◆ **Indoloro**, no se necesitan agujas, incisiones ni anestesia.
- ◆ **Agradable**, el procedimiento es solo un masaje cálido y confortable.
- ◆ **Rápidez**, tarda entre 20 minutos y 2 horas, dependiendo de las zonas de tratamiento.
- ◆ **Efectividad**, los pacientes pueden ver resultados instantáneos y una mejora gradual del área tratada.

Especificaciones técnicas.



Longitud de onda

Infrarrojo 940nm
Láser 650nm



Potencia de salida

Láser 0 a 200m W

PANTALLA PRINCIPAL	10.4'' Pantalla a color lcd, táctil
VOLTAJE	110V AC/60HZ
PANTALLA PIEZA	2,4 PULGADAS / 1,9 PULGADAS
MÁXIMA POTENCIA	2000W
PRESION DE VACIO	Presion absoluta: 10kPA-80Kpa(7,6-60,8 Cm Hg)
	Presion relativa: 20Kpa - 90kPA(15,2-68,4 Cm Hg)
	Revoluciones por minuto: 0-39RPM
PIEZA DE MANO 1	LUZ INFRARROJO: 0-20W
	RF: 0-100J/CM2 PULSO: 0-10S
PIEZA DE MANO 2	LUZ INFRARROJO: 0-20W
	RF: 0-100J/CM2 PULSO: 0-10S
PIEZA DE MANO 3	INFRARROJO: 0-10W
	RF: 0-50J/CM2 PULSO: 0-10S
PIEZA DE MANO 4	CAVITACION: 40,5KHz+28KHz
	POTENCIA DIODO LASER: 0-200mW
	REPOSO ENTRE PULSO: 0-5S
	PULSO: 1-5S
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	AIRE
DIMENSIÓN DEL EQUIPO	32x42x111CM
PESO DEL EQUIPO	44,5 Kg
TIPO DE EMPAQUE	Caja en aleación de aluminio

NewAge[®]
Medical

 317 368 3567

 info@newagecolombia.com

 www.newagecolombia.com

- Todos los derechos reservados 2021

